

Snabbguide till RotoBed® Care

Utgång: Tryck på knappen **Sittposition** tills sängen stannar i komfortläge. Lossa rotationsmekanismen med ett litet fottryck på greppet och vrid sakta runt sängen tills greppet låses. Återigen trycker du på **Sittposition** tills sängen stannar. För att underlätta klättringen kan ryggstödet drivas den sista delen framåt och sängen höjas lite i höjd.




Inträde: Hjälp använder att trycka änden så långt bak som möjligt. Tryck på knappen **Liggposition** tills sängen stannar i komfortläge. Lossa rotationsmekanismen med ett litet fottryck på greppet och vrid sakta runt sängen tills greppet låses. Återigen trycker du på **Liggposition** tills sängen är vänd och madrassen är horisontal.



Standard sitshöjd utan madrass är 32 cm över golvet. För individuell inställning, se bruksanvisningen.

Fjärrkontroll

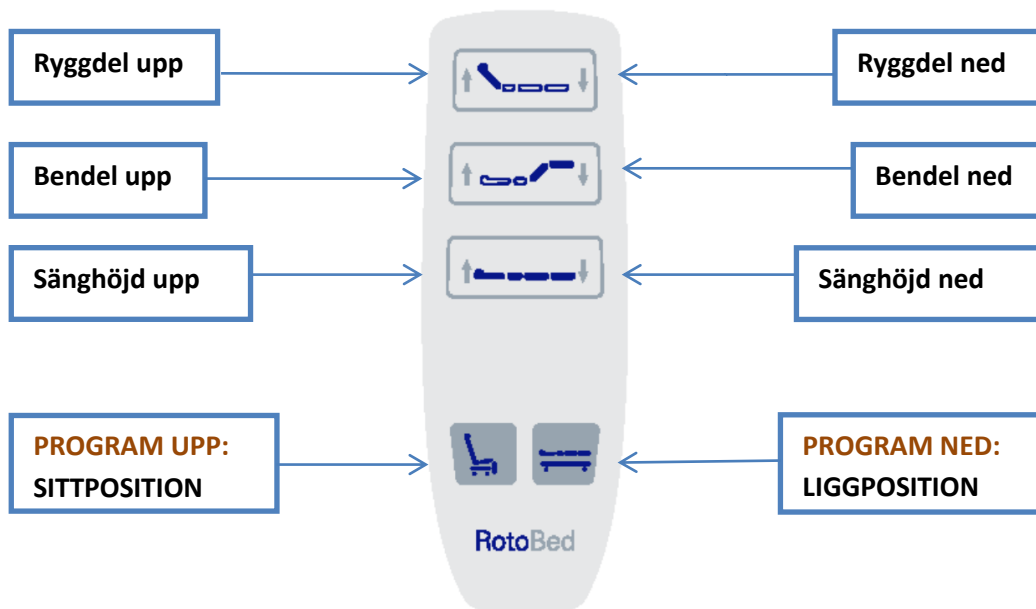

RotoBed®Care kan svänga antingen höger eller vänster. Därför kan fjärrkontrollen också anslutas till höger eller vänster sida av sängen. Ytterligare fjärrkontroll kan köpas. När fjärrkontrollen inte används hänger den på sänghästen.

Montering av madrass


RotoBed®Care innehåller en madrass som består av en huvuddel och en fot-del.

Huvudmadrassen är utrustad med 5 knappar på baksidan. Lägg först de tre nedre knapparna i spåren längst ner på sängen. Skjut madrassen mot foten. Tryck nu på de två knapparna i madrassens mitt ner i motsvarande hål i mitten av sängen.

På samma sätt har fotmadrassen två knappar som pressas ner i de två runda hålen i sängytan.

Montering av sengeheste

RotoBed® sängar kan levereras med sänghästar i metall eller eklaminat. Oavsett modell är sänghästarna monterade och borttagna på samma sätt:

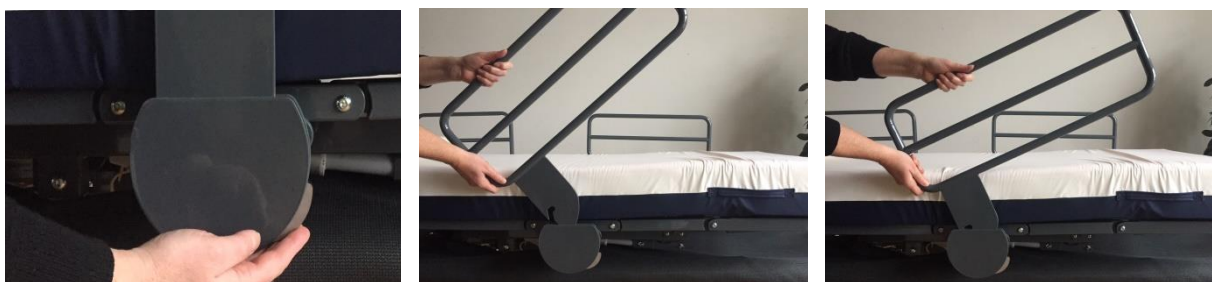

Tryck på den lilla fästet medan du lyfter sänghästen. Sänghästen sätts på igen och låses automatiskt.

Hjul och bromsar

Sängen är standard med integrerat Tente Linea dubbelhjul. Hjulen är roterbara. Bromsarna arbetar i par och kan manövreras från båda sidor av sängen.



OBS: RotoBed®Care ska inte användas av personer utan introduktion vid användning av sängen. Sängen testas enligt gällande standarder och regler för vårbäddar. Var medveten om att varken barn eller djur ligger under sängen när sängens delar är inställda. När bendelen är uphöjd, ladda det inte på personer eller tunga föremål. Sängen måste användas av användare enligt följande kriterier: Vikt 40-190 kg. Höjd \geq 146 cm. BMI \geq 17.